

KC-0585 電源タップホルダー


- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」およびIVスタンドの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- 本製品を使用する方ばかりでなく、看護、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

この電源タップホルダーは、ポンプ類の組付時の電源ラインマネジメントを補助することを目的に作られています。


各部の名称・部品の確認・仕様

*) イラストは本製品に電源タップを取付けた状態です。電源タップはお客様自身でご用意ください。

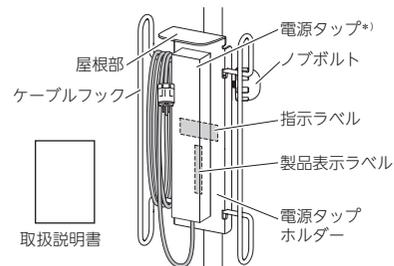

品番/品名	KC-0585/電源タップホルダー
寸法 (cm)	13 x 16 x 32.5
製品質量 (kg)	1.1
材質	本体:スチール製 ノブボルト:ABS
適合品	IVスタンド(KC-50*/KC-51*シリーズ)

取付方法

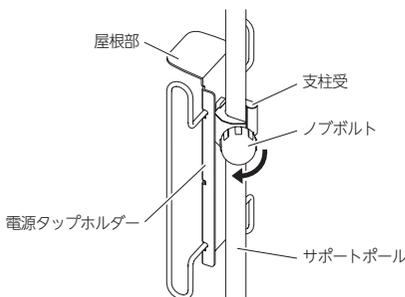

IVスタンドのサポートポールに電源タップホルダーの支柱受をはめ込み、ノブボルトでしっかりと固定してください。



- 電源タップホルダーを取付けるときは、IVスタンドの取扱説明書もご覧ください。
- ノブボルトが確実に固定されていることを確認してください。
- 電源タップホルダーは貼られているラベルを確認し、必ず屋根部を上にして取付けてください。

安全に使用するための注意事項

警告

- 電源タップホルダーの屋根部が上になるように取付けてください。上下を間違えて取付けると、IVスタンドのフックに掛けたバッグから水などの液体が垂れた場合、電源タップに水が付着し火災や感電のおそれがあります。また、故障の原因となります。
- お客様による修理・改造はしないでください。思わぬけがや故障の原因となります。

注意

- ケーブルフックに重いものを掛けしないでください。電源タップホルダーが不意に外れて落下し、電源タップや電源タップホルダーが破損するおそれがあります。
- ケーブルの巻きすぎに注意してください。ケーブルを巻きすぎると、ケーブルフックからケーブルが外れて、足などに引っ掛かり、IVスタンドが転倒して破損・変形したり、けがをするおそれがあります。
- 屋根部に物を置かないでください。落下して破損するおそれがあります。

シンボル定義

シンボル	説明
	シリアルナンバー
	製造年月
	製造業者
	取扱説明書参照
	取扱説明書参照

シンボル	説明
	必ず指示に従い、おこなうこと
	電源タップホルダーの使用時には屋根部が天面側になるように取付いていることを確認してください。
	電源タップホルダーの使用時には屋根部が地面側にならないようにしてください。

日常のお手入れ・長期保管について

<日常のお手入れ>

■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- ～ 81.4% 消毒用エタノール
- ～ 0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
- ～ 0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
- 0.05% グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
- ～ 1% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

以下の消毒剤も使用することができます。

- SuperSani-Cloth® 殺菌使い捨てワイプ
- CloroxHealthCare® プリーチワイプ

※別の方が電源タップホルダーを使用する前には、電源タップホルダーを消毒することをおすすめします。



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

注意

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレーズルは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れたり、変色・変質するおそれがあります。

<長期保管について>

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテックコールセンターまでお問い合わせください。
パラテックコールセンター ☎0120-54-8639 受付時間:平日8:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテック株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド 株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

KC-0585 Power strip holder


- Before using this product, be sure to read this instruction manual and the instruction manual for the IV stand to fully understand how to safely and properly use this product.
- In addition to the person who uses this product, nurses and caregivers should also read this instruction manual.
- After reading this instruction manual, store it in a place that can be easily accessed for later reference.
- Values described for the operating range, dimensions, angles, and weights are subject to normal manufacturing tolerances. Except for special cases, words such as approximately and about are omitted in this instruction manual to improve readability.
- Some of the descriptions in this instruction manual may differ from the product you have purchased due to model improvements.
- If you have any questions, please contact Paramount Bed or your distributor.

INTENDED USE

This power strip holder is designed to assist power line management when installing a pump.


PART NAMES, CHECKING PARTS, AND SPECIFICATIONS

*) The illustration shows this product with a power strip attached. Provide a power strip yourself.

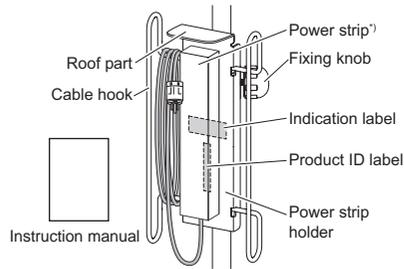

Model No. / Product Name	KC-0585 / Power strip holder
Dimensions (cm)	13 x 16 x 32.5
Product weight (kg)	1.1
Materials	Main unit: steel, fixing knob: ABS
Suitable products	IV stand (KC-50*/KC-51* series)

ATTACHMENT METHOD

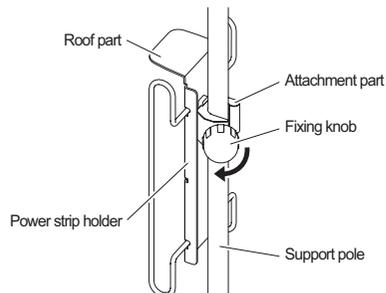

Fit the attachment part of the power strip holder to the support pole of the IV stand, and then tighten the fixing knob properly to secure the power strip holder.



- When attaching the power strip holder, also refer to the instruction manual for the IV stand.
- Make sure that the fixing knob is tightened properly.
- Check the label affixed to the power strip holder and be sure to attach the power strip holder with the roof part at the top.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

- Attach the power strip holder with the roof part at the top. If it is attached upside down by mistake and water or other liquid drips from a bag hanging from a hook of the IV stand, fire or electric shock may occur due to water getting on the power strip. This also may cause failure.
- Do not repair or modify the product by yourself. Doing so may cause an unexpected injury or failure.

CAUTION

- Do not hang heavy objects on the cable hook. The power strip holder may unintentionally become detached and fall, resulting in damage to the power strip or power strip holder.
- Be careful not to wind an excessive amount of cable. If you wind an excessive amount of cable, the cable may come off the cable hook and a foot or other body part may get caught on it, resulting in the IV stand falling over and becoming damaged or deformed or causing injury.
- Do not place any objects on the roof part. The objects may fall, causing damage.

PRODUCT SYMBOL DEFINITIONS

Symbol	Description
	Serial number
	Date of manufacture
	Manufacturer
	Refer to the instruction manual.
	Refer to the instruction manual.

Symbol	Description
	Be sure to carry out in accordance with the instructions.
	When using the power strip holder, check that it is attached so that the roof part is at the top.
	When using the power strip holder, make sure the roof part is not at the bottom.

DAILY MAINTENANCE AND LONG-TERM STORAGE

<Daily maintenance>

■ Removing stains

Perform steps ① to ③ below.

- ① Wipe off stains with a cloth soaked in a neutral detergent diluted with water and wrung out well.
- ② Wipe off any residual detergent with a cloth soaked in water and wrung out well.
- ③ Wipe off any residual moisture with a dry cloth.

■ Disinfecting parts

Use one of the disinfectants listed below at the specified concentrations by following the instructions in the instruction manual for the disinfectant.

- Up to 81.4% Ethanol for disinfection
- Up to 0.2% Benzalkonium chloride (e.g., Osvan)
- Up to 0.2% Benzethonium chloride (e.g., Hyamine)
- 0.05% Chlorhexidine gluconate (e.g., Hibitane)
- Up to 1% Sodium hypochlorite (e.g., Milton)

The following disinfectants can also be used.

- Super Sani-Cloth® Germicidal Disposable Wipe
- Clorox HealthCare® Bleach Wipe

* It is recommended to disinfect the power strip holder before another person uses the power strip holder.



Do not use an open sterilizer, autoclave, etc. to disinfect parts.

CAUTION

- Do not use volatile cleaning solutions (such as paint thinner, benzene, or gasoline) or cresol. Discoloration or deterioration may result.
- Do not use disinfectants other than those listed above. Damage or deterioration may result.
- Thoroughly wipe off parts with a damp cloth after using a neutral detergent or sodium hypochlorite. Not doing so may cause cracking, discoloration, or deterioration of the resin.

<Long-term storage>

- Avoid a location subject to high temperature or humidity, low temperature, dryness, or excessive dust. Store the power strip holder at a temperature between 14°F and 122°F (-10°C and 50°C) and humidity between 30% and 90% RH.
- Keep the instruction manual in a safe place so that it does not become lost.

AFTER-SALES SERVICE

For any queries about the after-sales service, contact your distributor or to the following address.

CONTACT INFORMATION

PARAMOUNT BED CO., LTD. Global Business Division
 14-5, 2-chome, Higashisuna, Koto-ku, Tokyo, 136-8670, Japan
 Tel: +81-(0)3-3648-2961/FAX: +81-(0)3-3648-5781
 For other contact information, please visit the website.
<https://www.paramount.co.jp/english/>

