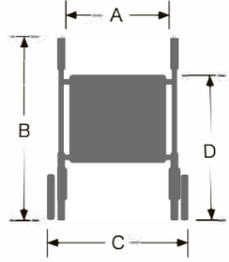
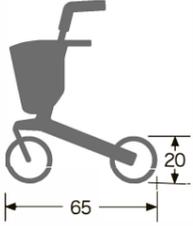


ジェミノ仕様

	Mサイズ KZ-325100	Lサイズ KZ-325200
	¥69,300(税抜¥63,000) TAISコード：00170-001643	¥69,300(税抜¥63,000) TAISコード：00170-001646
適応身長(めやす)	135~165cm	155~200cm
サイズ (単位:cm)		
	A: 47 / B: 69~88 / C: 60 / D: 55	A: 47 / B: 78~100 / C: 60 / D: 62
折りたたみ寸法	幅 25cm (自立可)	
質量	7.3kg	7.5kg
材質	フレーム: アルミ	
最大利用者体重	130kg	150kg
バスケット積載量	5kg	
前輪回転(首振り)	360度	

※カラーは本カタログに掲載したレッドのみです。※質量はバックレストと収納バスケットを含みます。

オプション				
<b>杖ホルダー</b> KZ-C29001 ¥8,800(税抜¥8,000)	<b>テーブル(ジェミノ用)</b> KZ-329022 ¥10,340(税抜¥9,400)	<b>抑速ブレーキキャスター (左右各1セット)</b> KZ-329001 ¥35,200(税抜¥32,000)	<b>スローダウンブレーキキャスター (左右各1セット)</b> KZ-C29007 ¥19,800(税抜¥18,000)	<b>交換用バスケット(ジェミノ用)</b> KZ-329023 ¥9,020(税抜¥8,200)
フレームに取り付けて杖を携帯できます。	ジェミノに取り付けられるテーブルです。(M/L共通)	ハンドルを押した場合や、スロープや坂道を下るときの加速を抑えます。	お使いになる方に合わせて、車輪の回りやすさを調節できます。	交換用のバスケットです。

パラマウントベッド株式会社

製品の  
お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-03-3648**  
※土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00~17:00(年始1/1~1/3は休業いたします)

- |        |                                 |                   |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| 本社     | 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号      | ☎(03)3648-1111(代) |
| 東京支店   | 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号      | ☎(03)3648-1171(代) |
| 札幌支店   | 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 | ☎(011)271-1181(代) |
| 仙台支店   | 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3      | ☎(022)239-5211(代) |
| さいたま支店 | 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1      | ☎(048)878-0100(代) |
| 横浜支店   | 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号      | ☎(042)795-8800(代) |
| 名古屋支店  | 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号      | ☎(052)963-0600(代) |
| 大阪支店   | 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号      | ☎(06)6443-8791(代) |
| 高松営業所  | 〒761-8031 高松市郷東町223番1           | ☎(087)881-8900(代) |
| 広島支店   | 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号       | ☎(082)293-1311(代) |
| 福岡支店   | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号   | ☎(092)461-1131(代) |

製品のお求め、ご相談は…

●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。  
 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

F22-C00774 2022年10月 希望小売価格改定版

as human, for human  
PARAMOUNT BED

GEMINO  
折りたたみ式歩行車 ジェミノ



軽く、使いやすく、スタイリッシュ。

パラマウントベッド株式会社

# GEMINO

## 1 押し手ハンドル

握りやすく滑りにくく、体を支えやすい独自の形状を採用。段差などにつまずいて、前のめりになった時も、手元が滑りにくいので安心です。ハンドルの高さは、Mサイズで13段階、Lサイズで15段階に調節できます。支柱には目盛りが付いているので、身長に合わせて細かく調節できます。

操作性、安全性、デザイン。  
そのすべてを追求した一台です。

## 2 座面

座って休憩できる座面を設けています。歩くときには足元が確認できるように、視認性の高いメッシュシートを使用しています。

## 3 フレーム

フレームは軽量なアルミを使用。表面にはキズやサビが付きにくい硬質アルマイト処理を施しています。

## 4 キャスター

屋外でもスムーズに進めるように、四輪すべてに直径20cmの大径キャスターを採用。幅も3.6cmのワイドタイプなので溝などに落ちにくい仕様です。

## 5 段差乗り越えバー

後輪フレームには、3cm程度の段差を乗り越える際に便利な、段差乗り越えバーを装備しています。

## 6 バックレスト

座面に座る際に腰部を支えるベルトが付いています。必要に応じて取り外しが可能です。

## 7 手元ブレーキ

操作しやすい大型のブレーキレバーを採用。ブレーキレバーを下方向に下げると、後輪キャスターをロックする駐車ブレーキとしても利用できます。

## 8 リフレクター

フレームの前後左右の計6カ所にリフレクター(反射板)を設置。安全性に配慮しています。

## 9 収納バスケット


メッシュ素材を使用することで、前方足元の視認性にも配慮しています。バスケットは簡単に着脱でき、2本のグリップが付いているほか、内側には小物の収納に便利なポケットも付いています。

## 10 折りたたみ式

座面の折りたたみ用持ち手を持ち上げると、簡単に折りたたみ、しっかりとロックされます。たたんだ状態を保持しやすいため、持ち運ぶ際も勝手に開いてしまう心配がありません。折りたたんだ状態で自立も可能です。

## 11 サイドデフレクター

後輪がドアや路面の異物と接触することを避けるためサイドデフレクターを備えています。

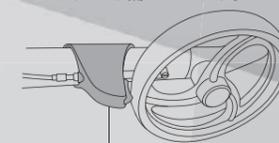

サイドデフレクター

