

製品名	製品コード	TAISコード	ベッド接続ケーブル	全長	全幅	全高	質量	希望小売価格
ベッド設置式リフト エレベオ	KQ-788L	00170-001544	付属*	216cm	162cm	210cm	86kg	オープン価格 (非課税)
	KQ-788S	00170-001543	なし					

\* 適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。

### オプション

製品名	製品コード	希望小売価格
ベッド接続ケーブル(KQ-788Sに取り付ければ、適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます)	KQ-7881	オープン価格
分岐ケーブル(エレベオをベッドに接続しながら、エアマットレス ここちあ結起 3Dのベッドリンク Iが利用できます)	KQ-7882	

### エレベオと適合する電動ベッド

ベッドタイプ	リフトを設置できる位置	ベッド接続ケーブルによる接続	
楽匠プラス Hタイプ*	3モーション/2モーション	頭側のみ	○
楽匠プラス Xタイプ*	3モーター/2モーション/2モーター	頭側・足側	○
楽匠 Sシリーズ 100cm幅*	らくらくモーション/2モーター	頭側・足側	-
レント	3モーター/2モーター	頭側・足側	○
クオラOne(KQ-B6000)	3モーター/2モーション/2モーター	頭側のみ	○

\* 適合するベッドでも、取り付けには一部制限があります。詳しくはお問い合わせください。また、記載したベッド以外の適合については、お問い合わせください。

※キャスター、ハイトスペーサー(KQ-027Aのみ)、キャスター付きハイトスペーサーを取り付けた状態では利用できません。

※IVポールホルダーをご使用の場合、IVポールホルダーを取り付けているボード側には設置できません。

※延長フレームをご使用の場合、足側には設置できません。

### スリングシート(別売)

スリングシートのタイプ	画像	製品コード	サイズ	TAISコード	希望小売価格
ハイバックタイプ (頭部の支持を 必要とする方に)	シート型	① KQ-T56S	S	00170-000854	¥51,700 (税抜¥47,000)
		KQ-T56M	M	00170-000854	¥51,700 (税抜¥47,000)
		KQ-T56L	L	00170-000854	¥51,700 (税抜¥47,000)
	脚分離型	② KQ-T58S	S	00170-000856	¥66,000 (税抜¥60,000)
		KQ-T58M	M	00170-000856	¥66,000 (税抜¥60,000)
		KQ-T58L	L	00170-000856	¥66,000 (税抜¥60,000)
ミドルバックタイプ (体幹の支持を 必要とする方に)	シート型	③ KQ-T55S	S	00170-000853	¥46,200 (税抜¥42,000)
		KQ-T55M	M	00170-000853	¥46,200 (税抜¥42,000)
	脚分離型	④ KQ-T57S	S	00170-000855	¥55,000 (税抜¥50,000)
		KQ-T57M	M	00170-000855	¥55,000 (税抜¥50,000)
		KQ-T57L	L	00170-000855	¥55,000 (税抜¥50,000)
		KQ-T59S	S	00170-000857	¥55,000 (税抜¥50,000)
ローバックタイプ (骨盤部の支持で 座れる方に)	セパレート型	⑤ KQ-T59M	M	00170-000857	¥55,000 (税抜¥50,000)



スリングシートの使い方を動画でご覧いただけます。

※スリングシートはリフトとセットで購入する場合に限り、1枚だけ非課税となります。

## パラマウントベッド株式会社

製品の  
お問い合わせは  
お客様相談室 フリーダイヤル **0120-03-3648**  
※ 土・日・祝日も受付いたします。受付時間:9:00~17:00(年始1/1~1/3は休業いたします)

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)  
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)  
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
 高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)  
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 [www.paramount.co.jp](http://www.paramount.co.jp)

製品のお求め、ご相談は…

**!** 安全に関するご注意  
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

2022年 希望小売価格改定版 G22-C00783



as human, for human

PARAMOUNT BED



パラマウントベッドなら  
リフト移乗が、もっとやさしくなります。

ベッド設置式リフト


**ELeveo**  
エレベオ

パラマウントベッド株式会社

# ご本人様に、安心感を。介護する方に、かんたんな操作性を。 パラマウントベッドのベッド設置式リフト

## ご本人様の目線の高さや姿勢の変化を抑えて、不安感の軽減に配慮しています。

エレベオの手元スイッチではハンガーのあげさげとベッドの高さ調節\*がおこなえます。ベッドの高さ調節を使えば、ご本人様の目線の高さを変えずに吊り上げられます。

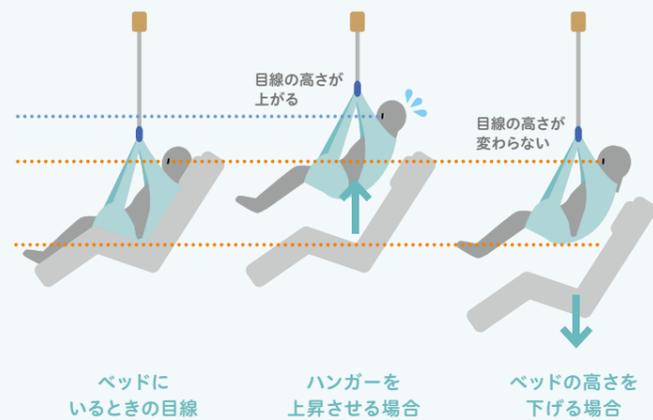


## 手元スイッチ

ハンガーのあげさげとベッドの高さ調節\*がおこなえます。ハンガーに掛けたまま操作できるので、持ち替えることなく、ご本人様から手を離さずにスムーズに作業できます。

\*適合する電動ベッドの高さ調節が操作できます。



ご本人様を揺れにくくするために、ハンガーをあげさげするときにスイングしにくい垂直昇降方式を採用しています。また、ご本人様に威圧感を与えにくいように、昇降ユニットを動かさずにハンガーだけを昇降させる方式としています。

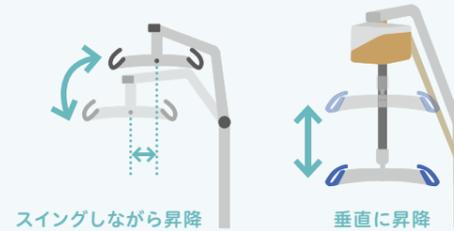

## 足元スッキリ、作業のしやすさと安全性に配慮しています。

移乗側にフレームがない構造のため、介助する方の足元に作業スペースを確保できます。一步踏み込んで接近できるので、スリングシートの敷き込みがしやすくなります。またリフトを設置したまま、ベッドサイドテーブルを利用できます。




## お部屋に合わせて、ベッドに合わせて利用できます。


使い方やレイアウトに合わせて、ベッドの頭側・足側、右側・左側、いずれにも取り付けられます。また、パラマウントベッドのさまざまな介護用ベッドと組み合わせて使えます。

※足側に設置できないベッドがあります。詳しくは、裏表紙をご確認ください。

6畳間に設置した場合\*

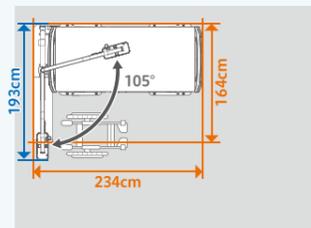

4畳半間に設置した場合\*

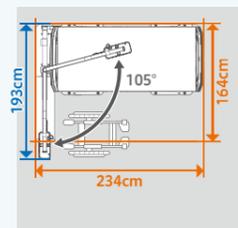

\* 楽匠プラス Hタイプ 多機能ボード(レギュラー・91cm幅)の場合。



足側(左側に離床)に設置

パラマウントベッドならではの、ご本人様の姿勢変化が少ない、やさしいリフト移乗が可能です。

## ベッドと車椅子の機能を有効に活用できます。

パラマウントベッド独自の背あげ機能 ラクリアモーションを搭載した介護用ベッドとティルト機能付きの車椅子を使用して、それぞれの角度を合わせておくことで、よりご本人様の姿勢変化が少なく、からだにやさしいリフト移乗を実現できます。



エレベオを使用したリフト移乗を動画でご覧いただけます。



## 本体スイッチ


昇降ユニットには、ハンガーをあげさげするボタンと、レポートボタンが付いています。

## 昇降ユニット

昇降ユニット本体は昇降しないため、介助する方にとって作業の邪魔になりにくい仕様です。エラーなどリフトの状態レポートやベルト交換などを日本語でお知らせします。

## ハンガー

ハンガーのみ垂直に昇降する方式を採用しています。床から7cmまでさげられます。

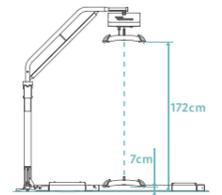

## 緊急停止レバー

緊急停止レバーを引くとハンガーの昇降が停止します。そのまま引き続けるとハンガーはゆっくりと下がります。緊急停止レバーを押し戻すと、通常の使用状態になります。

## アーム

アームは105°の可動範囲で自由に動かせます。なおエレベオをどの位置(ベッドの頭側・足側、右側・左側)に設置しても、ハンガーはベッド中央(ボトムの屈曲位置)に来ます。

## 手元スイッチ

パラマウントベッドのさまざまな介護用ベッドに対応します。  
※リフトのベースにベッドを載せるため、ベッドは7cm高くなります。

頭側(右側に離床)に設置