

ラインアップ

● ドライタイプ

次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒に対応する耐薬品性・防水カバーに、水蒸気を吸収・放出する「蒸れ」軽減機能を加えています。



主な機能	幅	長さ	製品コード	TAISコード	価格
	91cm幅	レギュラー	KE-611UQ	00170-001033	¥95,700(税抜¥87,000)
		ミニ	KE-612UQ	00170-001034	¥95,700(税抜¥87,000)
	83cm幅	レギュラー	KE-613UQ	00170-001035	¥95,700(税抜¥87,000)
		ミニ	KE-614UQ	00170-001036	¥95,700(税抜¥87,000)
	78cm幅	レギュラー	KE-615U		¥95,700(税抜¥87,000)

※側地には通気性がありません。 ※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

- 材質：側地(ソフトフィット面)／ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20%、側地(ハードフィット面)／ポリエステル70%、ポリウレタン30%、クッション材／ポリエステル・ポリウレタン
- 寸法：[KE-611UQ]幅91×長さ191×厚さ10cm(質量)7kg、[KE-612UQ]幅91×長さ180×厚さ10cm(質量)6.5kg、[KE-613UQ]幅83×長さ191×厚さ10cm(質量)6.5kg、[KE-614UQ]幅83×長さ180×厚さ10cm(質量)6kg、[KE-615U]幅78×長さ191×厚さ10cm(質量)6kg
- 持ち運び用ハンドル付き(片側)

● 通気タイプ



主な機能	幅	長さ	製品コード	TAISコード	価格
	91cm幅	レギュラー	KE-611TQ	00170-001042	¥95,700(税抜¥87,000)
		ミニ	KE-612TQ	00170-001043	¥95,700(税抜¥87,000)
	83cm幅	レギュラー	KE-613TQ	00170-001044	¥95,700(税抜¥87,000)
		ミニ	KE-614TQ	00170-001045	¥95,700(税抜¥87,000)
	78cm幅	レギュラー	KE-615T		¥95,700(税抜¥87,000)
	100cm幅	レギュラー	KE-617TQ	00170-001046	¥113,300(税抜¥103,000)

- 材質：側地／ポリエステル100%、クッション材／ポリエステル・ポリウレタン
- 寸法：[KE-611TQ]幅91×長さ191×厚さ10cm(質量)6.5kg、[KE-612TQ]幅91×長さ180×厚さ10cm(質量)6kg、[KE-613TQ]幅83×長さ191×厚さ10cm(質量)6kg、[KE-614TQ]幅83×長さ180×厚さ10cm(質量)5.5kg、[KE-617TQ]幅99×長さ191×厚さ10cm(質量)7kg、[KE-615T]幅78×長さ191×厚さ10cm(質量)5.5kg
- 持ち運び用ハンドル付き(片側)

● 清拭タイプ



主な機能	幅	長さ	製品コード	TAISコード	価格
	91cm幅	レギュラー	KE-611SQ	00170-001037	¥89,100(税抜¥81,000)
		ミニ	KE-612SQ	00170-001038	¥89,100(税抜¥81,000)
	83cm幅	レギュラー	KE-613SQ	00170-001039	¥89,100(税抜¥81,000)
		ミニ	KE-614SQ	00170-001040	¥89,100(税抜¥81,000)
	78cm幅	レギュラー	KE-615S		¥89,100(税抜¥81,000)
	100cm幅	レギュラー	KE-617SQ	00170-001041	¥106,700(税抜¥97,000)

※側地には通気性がありません。 ※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

- 材質：側地(ソフトフィット面・ハードフィット面)／ポリエステル70%、ポリウレタン30%、クッション材／ポリエステル・ポリウレタン
- 寸法：[KE-611SQ]幅91×長さ191×厚さ10cm(質量)6.5kg、[KE-612SQ]幅91×長さ180×厚さ10cm(質量)6kg、[KE-613SQ]幅83×長さ191×厚さ10cm(質量)6kg、[KE-614SQ]幅83×長さ180×厚さ10cm(質量)5.5kg、[KE-617SQ]幅99×長さ191×厚さ10cm(質量)7kg、[KE-615S]幅78×長さ191×厚さ10cm(質量)5.5kg
- 持ち運び用ハンドル付き(片側)

● 抗ウイルスタイプ



主な機能	幅	長さ	製品コード	価格
	91cm幅	レギュラー	KE-611V	¥95,700(税抜¥87,000)
	83cm幅	レギュラー	KE-613V	¥95,700(税抜¥87,000)

※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

- 材質：側地(ソフトフィット面・ハードフィット面)／ポリエステル70%、ポリウレタン30%、クッション材／ポリエステル・ポリウレタン
- 寸法：[KE-611V]長さ191×厚さ10cm(質量)6.5kg、[KE-613V]長さ191×厚さ10cm(質量)5.5kg
- 持ち運び用ハンドル付き(片側)

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648
※土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00～17:00(年始1/1～1/3は休業いたします)

- 本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
- 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
- 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
- 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)
- さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)
- 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
- 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区東1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
- 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
- 高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)
- 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
- 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

製品のお求め、ご相談は…

安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。

2022年 希望小売価格改定版 I22-C00812



as human, for human
PARAMOUNT BED

Everfit C³

エバーフィット シー スリー

【ハイ・スタンダードマットレス】



ご好評を頂いたロングセラー「エバーフィットマットレス」が進化。
3つの性能向上を遂げたリバーシブルマットレスです。

change 1
やわらかい
素材による
体圧分散性
の向上

change 2
独自素材
「ムーブサポートフォーム」による
動きやすさ
の向上

change 3
独自素材
「さらフェース」による
蒸れ軽減
※ドライタイプのみ

パラマウントベッド株式会社

「エバーフィットマットレス」の材質や構造を一新。 快適性と利便性を両立させた マットレスです。



change 1
体圧分散性


change 2
動きやすさ

change 3
蒸れ軽減*
DRYタイプ
*ドライタイプのみ


さらに体圧分散性が向上し、 床ずれリスクが軽減

ソフトフィット面の上層に、旧エバーフィットマットレスよりもやわらかい素材を採用し、身体とマットレスの接触面積を広くとることで、体圧分散性を向上させています。ハードフィット面もクッション材を変更することで、体圧分散性を高めています。

●ソフトフィット面の体圧分散図比較

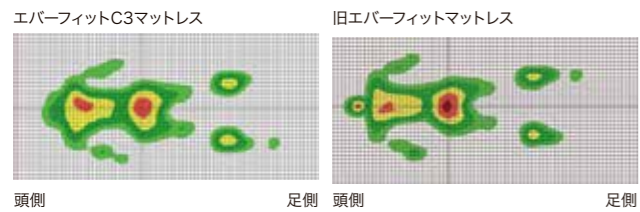

●ハードフィット面の体圧分散図比較

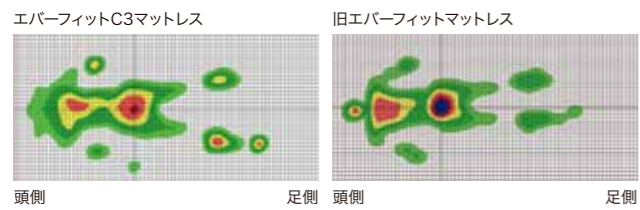


※被験者：168cm、体重65kg、男性。仰臥位・当社測定方法による。

独自素材「ムーブサポートフォーム」の 採用により、動きやすさが向上

人の身体のやわらかさに近いため、力が伝わりやすく、寝返りなどの動作がおこないやすい旧エバーフィットマットレスの特徴を継承しながら、より反発性の高い「ムーブサポートフォーム」を使用することで、ハードフィット面だけでなくソフトフィット面の動きやすさを向上させました。

●寝返り性および端座位安定性の官能評価

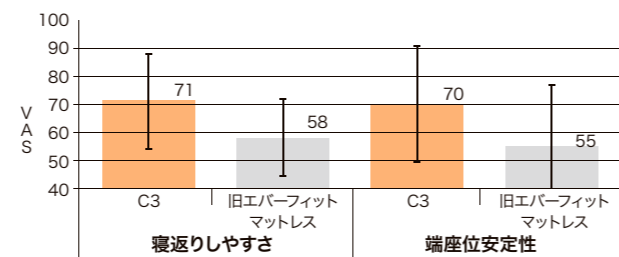


※翻身しやすさは、被験者5名、評価法VAS、各マットレスのソフト面を比較
※端座位安定性は、被験者4名、評価法VAS、各マットレスのソフト面を比較
※VASは、100で「翻身しやすさ」または「端座位をとりやすい」を意味します。

独自素材「さらフェース」が蒸れを軽減し、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポート

「さらフェース」が水分の浸入を防ぎながら、身体とマットレスの間に発生する水蒸気（蒸れ）をカバー表面で吸収します。吸収した水蒸気は、身体が接触していない部分から放出します。蒸れを軽減することで、床ずれ要因の1つといわれる皮膚湿潤にも配慮、床ずれ防止と快適な就寝環境をサポートします。

●サーマルマネキンを用いた、擬似的な吸湿量評価

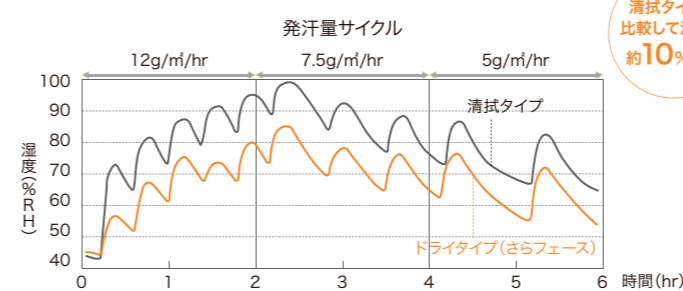

※サーマルマネキンの発汗量は、2時間ごとに12g/m²→7.5g/m²→5.0g/m²に切り替え

背あげ・膝あげへの追従性を向上させる カーブフィットライン

ハードフィット面側のクッション材に直線状のスリットを設けています。またサイドエッジにもカッティングを施しています。マットレスの屈曲性を高めてベッドの動きへの追従性を向上させることで、背あげに伴う圧迫感と姿勢のくずれを抑えます。

消臭加工を施し、臭いの成分を吸着・分解

側地に消臭加工を施し、排泄物・汗・体臭などの臭いの成分を吸着・分解します。
※ソフトフィット面のみ

メンテナンスに配慮した分割構造


クッション材は、ハードフィット面側とソフトフィット面側に分割でき、個別に交換できます。使用する頻度の高い面だけ交換できるので、ランニングコストの低減にもつながります。

清拭消毒に対応する抗ウイルスカバー

マットレスカバーに抗ウイルス加工した生地 (BYERUS : バイラス) を採用。清拭消毒にも対応します。

※すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。
※感染を防ぐものではありません。
※抗ウイルスタイプのみ

●メカニズム

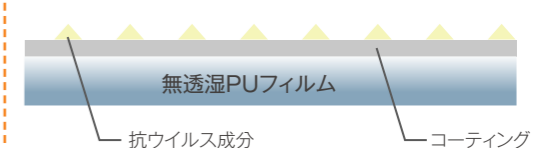

清拭タイプと比較して湿度が約10%低下