



IVスタンド KC-518

脚部にステップを設けており、足で踏んで固定したり、段差を乗り越えるなどの操作がしやすくなっています。

※スタッキングはできません。
※電源タップホルダー付属のKC-516を用意しています。

OPTION ※オプションは、酸素ボンベホルダー以外すべてのIVスタンドに共通で使用できます。

酸素ボンベホルダー ※特許出願済

500ℓの酸素ボンベ(直径9.5~11.5cm)が取り付けられます。補助脚を設けており、酸素ボンベを取り付けたときの転倒を予防します。

KC-0591 (KC-519・KC-517シリーズ用)
KC-0581 (KC-518、KC-516用)



※酸素ボンベホルダーを取り付けた状態では、スタッキングできません。

ハルンバッグホルダー KC-058A


ノブボルトでIVスタンドの支柱に取り付けて、ハルンバッグなどが掛けられます。



連結アーム ※特許出願済

ベッド、ストレッチャー、車いすとIVスタンドを連結して一緒に移動できます。一定の距離を保つので、チューブが引っ張られたりすることを予防します。

KC-0582 (ベッド・ストレッチャー用)

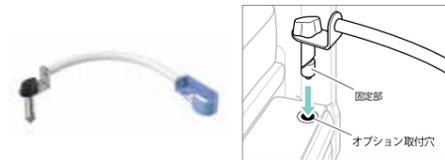

※オプション取付穴を有する当社製のベッド、または、当社製のストレッチャーKK-715・KK-725シリーズに適合します。オプション取付穴や、IVボール取付穴に固定して使用します。

KC-0583 (車いす用)



※当社製の車いすT50・T51・T54シリーズに適合します。付属のホルダーを車いすに取り付けてから連結アームを固定して使用します。

製品名	製品コード	寸法(cm)	質量	希望小売価格	
IVスタンド	スタッキングタイプ	● KC-519B	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	5.5kg	¥56,100 (税抜¥51,000)
		● KC-519P	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	5.5kg	¥56,100 (税抜¥51,000)
		● KC-519G	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	5.5kg	¥56,100 (税抜¥51,000)
	スタッキングタイプ(電源タップホルダー付属)	● KC-517B	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	6.6kg	¥71,500 (税抜¥65,000)
		● KC-517P	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	6.6kg	¥71,500 (税抜¥65,000)
		● KC-517G	脚部最大外径47.9×高さ143~210.5	6.6kg	¥71,500 (税抜¥65,000)
スタンダードタイプ	● KC-518	脚部最大外径47.4×高さ132.2~199.7	4.2kg	¥52,800 (税抜¥48,000)	
スタンダードタイプ(電源タップホルダー付属)	● KC-516	脚部最大外径47.4×高さ132.2~199.7	5.3kg	¥69,300 (税抜¥63,000)	
電源タップホルダー	KC-0585	幅13×奥行16×高さ32.5	1.1kg	¥22,000 (税抜¥20,000)	
酸素ボンベホルダー	KC-519・KC-517シリーズ用	KC-0591	幅12.7×奥行23.7×高さ31.5	1.3kg	¥25,300 (税抜¥23,000)
	KC-518、KC-516用	KC-0581	幅12.7×奥行23.7×高さ41.2	1.5kg	¥22,000 (税抜¥20,000)
連結アーム	ベッド・ストレッチャー用	KC-0582	幅4.6×奥行45.8×高さ10.3	500g	¥24,200 (税抜¥22,000)
	車いす用	KC-0583	幅4.6×奥行45.8×高さ10.3(※)	665g	¥26,400 (税抜¥24,000)
ハルンバッグホルダー	KC-058A	幅10.5×奥行13×高さ5.3	250g	¥8,800 (税抜¥8,000)	

※付属のホルダーの寸法を含みません。

パラマウントベッド株式会社

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

製品のお求め、ご相談は…

! 安全に関するご注意
製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

2022年 希望小売価格改定版 I22-C00820

思いやりの先にできました。

カーテンに引っかかりにくい新形状のハンガートップなど、さらなる使いやすさによる安心感を。パラマウントベッドのIVスタンド。

パラマウントベッド株式会社





施設内での使い勝手を吟味した、新しいカタチです。

NEW

ハンガートップ

2500mlまでの輸液バッグを取り付けられます。病室のカーテンに引っかかりにくい形状を採用しているため、より安全に扱えます。

スタッキングによる 保管スペースの削減

安定性の高い5輪脚でありながら、スタッキングが可能のため、最小限のスペースで保管できます。また、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。電源タップホルダーをつけた状態でもスタッキングができます*。

※KC-519・KC-517シリーズのみ

* 電源タップホルダーを取り付ける向きによっては、スタッキングするときに接触する場合があります。

安全性の高い、高さ調節機能

上下ストッパーはつまみ形状で、握ればゆるみ、離せば支柱をロックします。ノブボルトで支柱をロックする方式とは異なり、締め忘れや締め不足が起きないよう配慮した方式です。

急落下防止機能

支柱の内部にダンパーを設けることにより、上下ストッパーを緩めたときに急な落下を防止できます。

3色のカラーバリエーション

ブルー、ピンク、グリーンの3色のカラーを用意しました。各病棟ごとに色分けするなどの使い方ができます。

※KC-519・KC-517シリーズのみ

多様な持ち方が可能なグリップ

グリップは、形状の工夫や12段階の角度調節機能により、多様な持ち方に対応しています。



走行性と安全性に優れたキャスター

キャスターは、回転が滑らかで小回りもしやすい設計です。エレベーターの溝などに車輪が落下しないように車輪の両側には突起を設けています。また車輪にはゴミが詰まりにくく、分解清掃も可能です。



NEW

抗菌・抗ウイルスへの配慮

次亜塩素酸ナトリウム(1%)が使用できる耐薬品性により、血液汚染などの消毒に対応できます。

ICU/HCUなどでME機器を複数使用する場合に便利です。

NEW

電源タップホルダー

マグネット式の電源タップを取り付けられます。使用しないときには電源コードを掛けられるため、コードの整理や移動の際に便利です。

※電源タップホルダー付属のKC-517シリーズ、KC-516を用意しています。

※単品でもお求めいただけます(KC-0585)。

