

ストレッチフィットII [ハイ・スタンダードマットレス]



	適合するベッドのサイズ	製品コード	TAISコード	価格	寸法 (cm)	質量 (kg)
通気	91cm幅 レギュラー	KE-7A1T	00170-001716	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ10	8
	91cm幅 ミニ	KE-7A2T	00170-001717	オープン価格	幅91×長さ180×厚さ10	7.5
	83cm幅 レギュラー	KE-7A3T	00170-001718	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ10	7.5
	83cm幅 ミニ	KE-7A4T	00170-001719	オープン価格	幅83×長さ180×厚さ10	7
	100cm幅 レギュラー	KE-7A7T	00170-001720	オープン価格	幅99×長さ191×厚さ10	9
さらドライ	91cm幅 レギュラー	KE-7A1N	00170-001721	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ10	8
	83cm幅 レギュラー	KE-7A3N	00170-001722	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ10	7
抗ウイルス	91cm幅 レギュラー	KE-7A1V	00170-001723	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ10	8
	83cm幅 レギュラー	KE-7A3V	00170-001724	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ10	7

○材質：[通気タイプ] マットレスカバー/ポリエステル100%、クッション材/ポリエステル・ウレタンフォーム
 [さらドライ、抗ウイルス] マットレスカバー(トップ)/ポリエステル70%・ポリウレタン30%、(ボトム)/ポリエステル65%・ポリウレタン35%、クッション材/ポリエステル・ウレタンフォーム
 ○持ち運び用ハンドル付き(片側)
 ※さらドライタイプ、抗ウイルスタイプの側地には通気性がありません。
 ※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

ストレッチグライドII [床ずれ防止マットレス(静止型マットレス)]



	適合するベッドのサイズ	製品コード	TAISコード	価格	寸法 (cm)	質量 (kg)
通気	91cm幅 レギュラー	KE-7B1T	00170-001725	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ12.5	10.5
	91cm幅 ミニ	KE-7B2T	00170-001726	オープン価格	幅91×長さ180×厚さ12.5	10
	83cm幅 レギュラー	KE-7B3T	00170-001727	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ12.5	9.5
	83cm幅 ミニ	KE-7B4T	00170-001728	オープン価格	幅83×長さ180×厚さ12.5	9
	100cm幅 レギュラー	KE-7B7T	00170-001729	オープン価格	幅99×長さ191×厚さ12.5	11.5
さらドライ	91cm幅 レギュラー	KE-7B1N	00170-001730	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ12.5	11
	83cm幅 レギュラー	KE-7B3N	00170-001731	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ12.5	10
抗ウイルス	91cm幅 レギュラー	KE-7B1V	00170-001732	オープン価格	幅91×長さ191×厚さ12.5	11
	83cm幅 レギュラー	KE-7B3V	00170-001733	オープン価格	幅83×長さ191×厚さ12.5	10

○材質：[通気タイプ] マットレスカバー/ポリエステル100%、クッション材/ポリエステル・ウレタンフォーム
 [さらドライ、抗ウイルス] マットレスカバー(トップ)/ポリエステル70%・ポリウレタン30%、(ボトム)/ポリエステル65%・ポリウレタン35%、クッション材/ポリエステル・ウレタンフォーム
 ○持ち運び用ハンドル付き(両側)
 ※さらドライタイプ、抗ウイルスタイプの側地には通気性がありません。
 ※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは **お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648**
土・日・祝日も受付いたします。受付時間:9:00~17:00(年始1/1~1/3は休業いたします)

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区東1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
 高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

製品のお求め、ご相談は…

! 安全に関するご注意
 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
 ●マットレスは非課税のベッドとセットで購入する場合に限り、非課税となります。

G23-C00855



as human, for human
PARAMOUNT BED

介護保険対応

背あげをおこなうケアに対応するために、
ストレッチマットレスが進化しました。



[ハイ・スタンダードマットレス]

ストレッチフィット
Stretch-Fit II

[床ずれ防止マットレス(静止型マットレス)]

ストレッチグライド
Stretch-Glide II

進化した
ストレッチシステム+グライドシートで
背あげによるずれを軽減

進化した
ウレタンフォーム層で
優れた体圧分散性

進化した
マットレスカバー(側地)で
蒸れ軽減・抗ウイルス加工


パラマウントベッド株式会社

3つの進化で、「ずれ軽減」「体圧分散」「蒸れ軽減」の性能が向上。背あげの機会を増やし、より身体にかかる負担が少なく過ごせるようにサポートします。

進化した ストレッチシステム+グライドシート

●ストレッチシステム

ベッドの背あげに合わせてマットレスが伸びることで、背あげに伴う胸部や腹部の圧迫感、背部や臀部に加わるずれ力を軽減します。カッティング加工を施した範囲が広くなり、旧機種よりも伸びやすくなりました。起きあがりの姿勢がよくなるため、動きやすさと床ずれ予防に効果を発揮します。

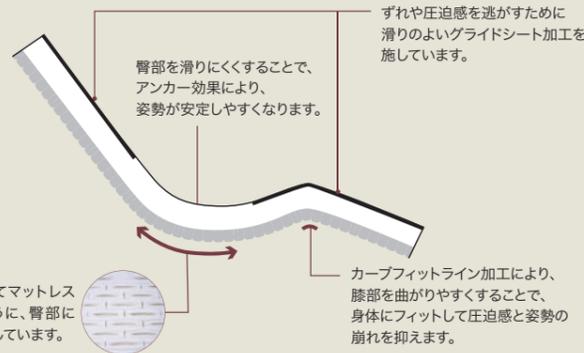

●グライドシート

ウレタンフォームの上面に滑りのよいグライドシートを設けています。ベッドの背あげをするときに、クッション材とカバーの間を滑らせて身体のずれや圧迫感を軽減します。ストレッチフィットIIは、グライドシートを新採用。旧機種と比較してずれ力約50%減を実現しています。ストレッチグライドIIは、横方向には滑りにくく縦方向にだけ滑りやすいグライドシートを採用して、ずれ力が旧機種と比較して約35%減。横ずれを防ぎ、より姿勢が安定しやすくなります。

進化した ウレタンフォーム層

ストレッチフィットIIは、ウレタン層の厚みを1cm増やして旧機種よりも体圧分散性を向上。ストレッチグライドIIは、優れた体圧分散性はそのままに、新しく、寝返りなどの動作がおこないやすい特性のムーブサポートフォームを採用しています。

進化した マットレスカバー（側地）

●吸放湿性と肌あたりの良さを両立する「さらドライ」タイプをラインアップに追加

独自素材が身体とマットレスの間に発生する水蒸気を吸収・放出し、蒸れを軽減します。床ずれ要因のひとつといわれる皮膚湿潤に配慮しながら、カバーの表側を肌あたりの良い生地とすることで、過ごしやすい就寝環境をサポートします。



●清拭消毒に対応する「抗ウイルス」タイプをラインアップに追加

マットレスカバーに抗ウイルス加工した生地（BYERUS:バイラス）を採用しています。細菌やウイルスに効果を発揮するアルコールや次亜塩素酸ナトリウム（1%）での清拭が可能です。

※すべてのウイルスに対して効果があるわけではありません。
※感染を防ぐものではありません。
※抗ウイルス加工による人体への影響はありません。




ストレッチフィットII

進化したストレッチシステムに、厚みを増したウレタンフォーム層をプラス。ずれ力の軽減*1と体圧分散性を両立。

厚さ10cmの3層構造により優れた体圧分散性を発揮


ウレタンフォーム層を旧機種より1cm厚くし、体圧分散性を向上。クッション材の上面にグライドシートを新採用し、背あげをするときのずれ力を軽減しています。

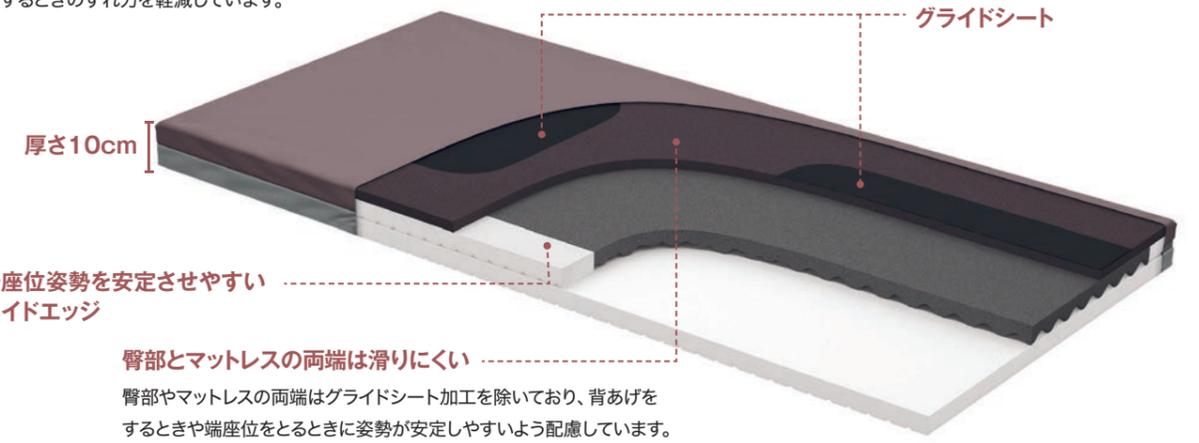

対象者の目安（床ずれ発生リスク度）

なし 軽度 中等度 高度

ストレッチフィットII

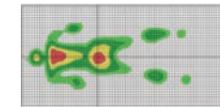

低 圧力 高


被験者：168cm、体重65kg、男性。
当社測定方法による。

ストレッチグライドII

静止型マットレスで最高レベル*2の体圧分散性はそのままに、進化したストレッチシステムとグライドシートでずれ力を軽減*1。

厚さ12.5cmの4層構造が、最高レベルの体圧分散性を発揮


3層のウレタンフォーム層をプラスし、静止型マットレスで最高レベルの体圧分散性を実現しています。床ずれリスクを軽減しながら、動きやすさや寝心地の良さにも配慮しています。

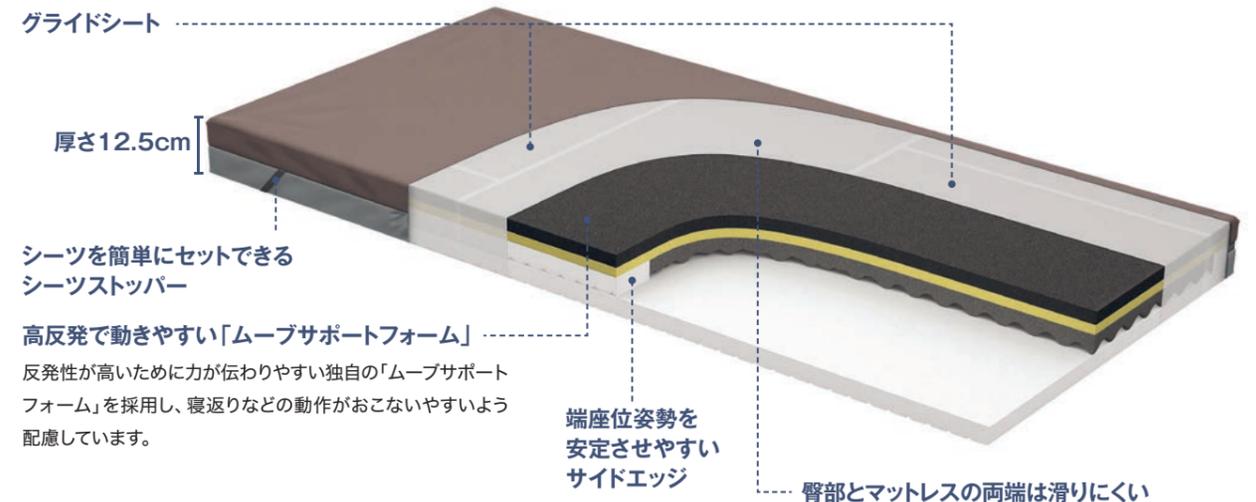

対象者の目安（床ずれ発生リスク度）

なし 軽度 中等度 高度

ストレッチグライドII

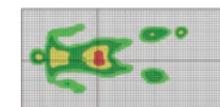

低 圧力 高

被験者：168cm、体重65kg、男性。
当社測定方法による。

*1 旧機種との比較。 *2 当社マットレスラインアップ内での相対比較。