

バナナフィットシリーズ ラインアップ



バナナフィット				
タイプ	サイズ	製品コード	TAISコード	価格
通気	S	KE-P113T	00170-001180	¥8,800 (税抜 ¥8,000)
	M	KE-P112T	00170-001181	¥14,300 (税抜 ¥13,000)
	L	KE-P111T	00170-001182	¥20,900 (税抜 ¥19,000)
清拭	S	KE-P113S	00170-001183	¥12,100 (税抜 ¥11,000)
	M	KE-P112S	00170-001184	¥22,000 (税抜 ¥20,000)
	L	KE-P111S	00170-001185	¥26,400 (税抜 ¥24,000)

○材質: 詰め物/ポリウレタンフォーム100% (難燃仕様)、側地/ポリエステル100% (難燃仕様)
 ○寸法: [KE-P113T]全長46×全幅21cm(質量)0.2kg
 [KE-P112T]全長109×全幅31cm(質量)0.6kg
 [KE-P111T]全長140×全幅42cm(質量)1.0kg
 [KE-P113S]全長46×全幅21cm(質量)0.2kg
 [KE-P112S]全長109×全幅31cm(質量)0.7kg
 [KE-P111S]全長140×全幅42cm(質量)1.2kg
 ○最大使用者体重: 138kg

バナナフィット 清拭カバー			
サイズ	製品コード	価格	
Sサイズ用	KE-C113S	¥5,500 (税抜 ¥5,000)	
Mサイズ用	KE-C112S	¥8,800 (税抜 ¥8,000)	
Lサイズ用	KE-C111S	¥9,900 (税抜 ¥9,000)	

交換用として、または通気タイプに被せて使用できます。



バナナフィット				
サイズ/形状	タイプ	製品コード	TAISコード	価格
スクエア (SQタイプ)	通気	KE-P114T	00170-001772	¥22,000 (税抜 ¥20,000)
	清拭	KE-P114S	—	¥33,000 (税抜 ¥30,000)
ロング (LGタイプ)	通気	KE-P115T	00170-001773	¥26,400 (税抜 ¥24,000)
	清拭	KE-P115S	—	¥39,600 (税抜 ¥36,000)
ラフト (RFタイプ)	通気	KE-P116T	00170-001774	¥17,050 (税抜 ¥15,500)
	清拭	KE-P116S	—	¥27,500 (税抜 ¥25,000)

○材質: 詰め物/ウレタンフォーム (難燃仕様)、側地/ポリエステル100% (難燃仕様)
 ○寸法: [KE-P114T]全長70×全幅70cm(質量)1.6kg
 [KE-P114S]全長70×全幅70cm(質量)1.8kg
 [KE-P115T]全長120×全幅50cm(質量)1.9kg
 [KE-P115S]全長120×全幅50cm(質量)2.1kg
 [KE-P116T]全長65×全幅62cm(質量)0.9kg
 [KE-P116S]全長65×全幅62cm(質量)1.0kg
 ○最大使用者体重: 138kg

バナナフィット 清拭カバー			
形状	製品コード	価格	
スクエア (SQタイプ) 用	KE-C114S	¥11,000 (税抜 ¥10,000)	
ロング (LGタイプ) 用	KE-C115S	¥13,200 (税抜 ¥12,000)	
ラフト (RFタイプ) 用	KE-C116S	¥10,450 (税抜 ¥9,500)	

交換用として、または通気タイプに被せて使用できます。



バナナフィット スモールフロータイプ			
タイプ	製品コード	TAISコード	価格
清拭	KE-P117S	00170-001763	¥18,700 (税抜 ¥17,000)

○材質: カバー/ポリエステル71%・ポリウレタン29% (難燃仕様)、詰め物/ウレタンフォーム (難燃仕様)
 ○寸法: 幅28×長さ50×最大厚さ4cm (質量)0.25kg
 ○最大使用者体重: 180kg

製品のお求め、ご相談は…



安全に関するご注意
 製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
 ●記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。

2024.08.23 C00895



PARAMOUNT BED


BananaFit

体位変換器 バナナフィット



身体にかかる圧力の分散や筋緊張の緩和を促せるように、利用者様の姿勢を保持します。

身体へのフィット感や使いやすさが進化を遂げました。

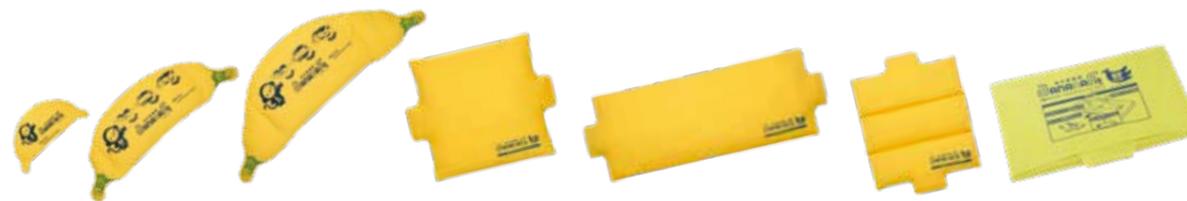

形状と材質が
身体にフィットしやすい

イラスト表示で
使い方がわかりやすい

※バナナフィットM、Lサイズ、スモールフロータイプのみ

材質の工夫で
メンテナンスしやすい

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648
 土・日・祝日も受付いたします。 受付時間: 9:00~17:00 (年始1/1~1/3は休業いたします)

本 社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111 (代)
 東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171 (代)
 札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181 (代)
 仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211 (代)
 さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100 (代)
 横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800 (代)
 名古屋支店 〒461-0001 名古屋市中区東1丁目20番17号 ☎(052)963-0600 (代)
 大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791 (代)
 高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900 (代)
 広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311 (代)
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131 (代)

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

パラマウントベッド株式会社

WELL-BEING for all beings

用途に合わせて組み合わせられる充実したラインアップ。



S、M、Lサイズ

身体のラインに沿った使いやすい形状。両端にグリップを設けて体位変換に対応します。

スクエア(SQタイプ)

円背の方や上半身に拘縮がある方のポジショニングなどに適しています。体位変換に対応するハンドルが付いています。

ロング(LGタイプ)

側臥位をとる場合や下肢に拘縮がある方のポジショニングなどに適しています。体位変換に対応するハンドルが付いています。

ラフト(RFタイプ)

膝の関節に拘縮がある方のポジショニングなどに適しています。体位変換に対応するハンドルが付いています。

スモールフロータイプ

マットレスの下に差し込みやすく、抜き取りもしやすいように工夫されているので、小さな体位変換が簡単に実施できます。

1 フィットしやすい

身体や用途に合わせてやすい

身体のラインに沿ったものや、用途に合わせて対応しやすいラインアップを用意しています。



Sサイズ2個
使用例



Mサイズ2個
使用例



Lサイズ2個
使用例

伸縮性に富んだカバー生地

通気カバーと清拭カバーはいずれも、より快適に過ごせるように、縦方向にも横方向にも伸びやすい生地を使用して、身体とのフィット感を高めています。また、通気カバーは通気性に優れているので、蒸れ感を軽減します。

※スモールフロータイプは清拭カバーのみ。

従来品よりきめの細かい「パウダースノーフォーム」

小さく、ランダムにカットされたウレタンフォームが、形の作りやすさと崩れにくさを両立。さらっと、ふわっと、身体に触れたときのフィット感を高めます。

※スモールフロータイプを除く



2 わかりやすい

カバーには、使い方がわかりやすいようにイラストがプリントされています。※バナナフィットM、Lサイズ、スモールフロータイプのみ



3 メンテナンスしやすい

通気タイプ

高い洗浄性

耐洗浄性の高いウレタンフォームを使用しているため、丸洗いできて、清潔にお使いいただけます。液温80度までの洗浄、100度までの乾燥が可能です。

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)に対応

オートクレーブによる高温(135度まで)での滅菌も可能です。

清拭タイプ

撥水加工

表面に撥水加工を施しているため、汚れが付着しにくく、拭き取りもしやすくなっています。

高い耐薬品性

さまざまな細菌・ウイルスに効果を発揮する次亜塩素酸ナトリウムなどを使った清拭消毒に対応します。

※清拭消毒に使用できる薬剤などは取扱説明書をご覧ください。

洗濯も可能

緑色の清拭カバーは取り外しが可能です。臭いや汚れが気になるときは、取り外した清拭カバーを洗濯機で洗えます。

※清拭カバーを取り外せば、中身は通気タイプと同じ方法でメンテナンスできます。(スモールフロータイプを除く)

使用例



Lサイズ



側臥位：下肢を支える



側臥位：背部を支える



背あげ：肘掛けとして上肢を支える



Mサイズ



仰臥位：上肢を支える



側臥位：抱きかかえるように上肢を支える



車椅子：膝の上に置き上肢を支える



Sサイズ



仰臥位：骨盤の両側を支える



仰臥位：上肢を支える



車椅子：骨盤が倒れないようサポートする



スクエア(SQタイプ)



仰臥位：下肢(膝裏)を支える



仰臥位：円背の方の背部を支える



ロング(LGタイプ)



側臥位：背部を支える



背あげ：体幹を支える



ラフト(RFタイプ)



仰臥位：両下肢を支える



仰臥位：丸めて下肢(膝裏)を支える



車椅子：背中とバックレストとの間に
入れて背中を支える

「小さな体位変換」用クッション スモールフロータイプ



スモールフロータイプ



差し込む

カバーに滑りやすい素材を採用、3方向に傾斜をつけた形状により差し込みやすく、身体にフィットしやすいように配慮されています。



抜き取る

クッションを引き出しやすいように取っ手が付いています。上面にシーツキーパーが付いているため、シーツのずれを抑えられるように工夫されています。



入れ替える

特に体位制限のない場合は、左右交互に入れ替えるだけなので、左にあれば次は右に、右にあれば次は左に、作業内容が容易に判断できます。