



## 安全に使用するための注意事項

	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺 <sup>まひ</sup> など)を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	--

### ■ソフトカバーと組合せて使用するサイドレールは弊社が指定する適合品をご使用ください


- 指定以外の製品や他社製品と組合せて使用すると、ソフトカバーが正しく取付けられずに意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。適合品の確認は、裏表紙の「仕様」および下図を参照してください。

製品識別表示ラベル／安全ラベル



サイドレールの品番は、製品識別表示／安全ラベルに記載されています。

※貼付位置は製品によって異なります。

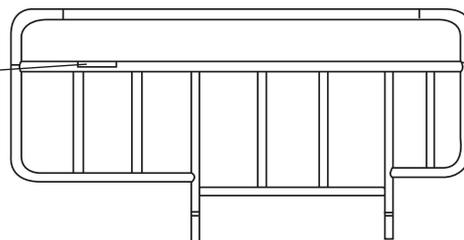

※製品識別表示／安全ラベル上は、S〇〇〇もしくはA19と表示されています。  
例) S161Q→KS-161Qを示します

### ■お客様による修理・改造はしないでください

- 意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをしたり、ソフトカバーが破損したりするおそれがあります。

### ■ソフトカバー使用時もすき間に注意してください

- サイドレールとボードなどとのすき間に身体の一部がはさまれて、けがをするおそれがあります。

### ■ご使用前にソフトカバーとサイドレールの取扱説明書をよくお読みください

- 誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

### ■ソフトカバーに火気を近づけないでください

- ソフトカバーが変質・変形・発火する原因となります。

### ■ファスナーを完全に閉めた状態で使用してください

- ソフトカバーが外れ、思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## ■ソフトカバーに先のとがったものを接触させないでください

- ソフトカバーに穴があいたり、破損したりするおそれがあります。

## ■ソフトカバーは正しい向き・位置で取付けてください

- 誤った向きや位置で取付けて使用すると、けがや破損の原因となります。


## ■ファスナーカバーを固定した状態で使用してください

- ファスナートップ(引手)が身体などに接触して、思わぬけがや破損の原因となります。

## ■ソフトカバーにほつれや破れが見つかった場合は、使用を中止してください

- 思わぬけがをするおそれがあります。

## 取付方法

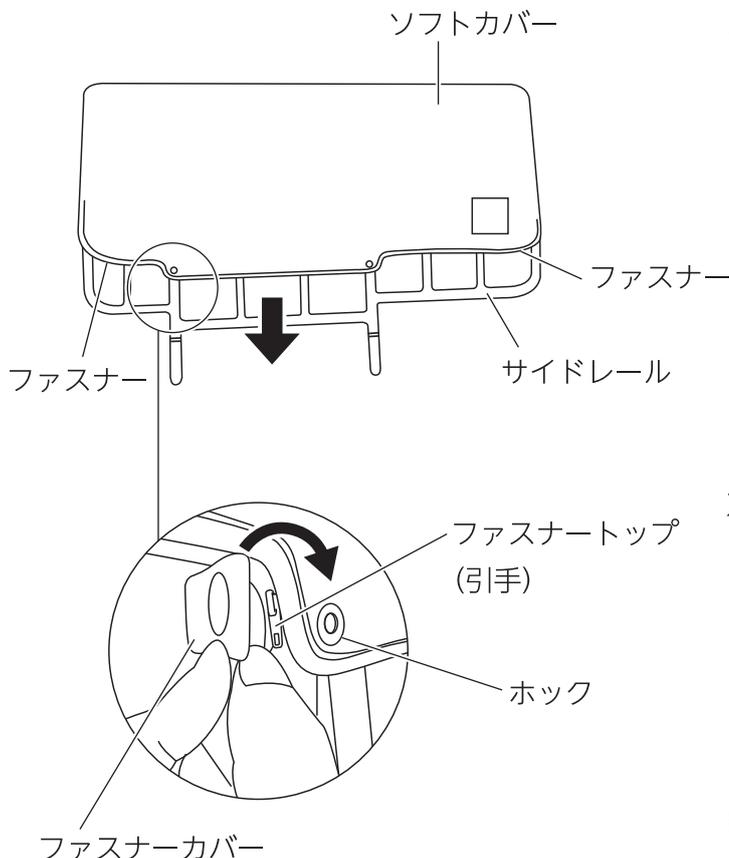

### 1. サイドレールへの取付け

ソフトカバーのファスナー(左右2ヶ所)をいっぴいまで開き、ソフトカバーをサイドレールにしっかり被せてください。

### 2. ソフトカバーの固定

左右2ヶ所のファスナーを完全に閉め、ファスナートップ(引手)を隠すようにファスナーカバーのホックを固定してください。(左右2ヶ所)

※開梱時にウレタンフォームの臭いがした場合は、日陰で1日程度干してからお使いください。

※取外しは、取付方法と逆の手順で行ってください。

# お手入れ (ソフトカバーの洗いかた) ・ 長期保管について

■お手入れは、下図の絵表示に従ってください。(品質表示/安全ラベルにも同様の記載がされています)



- ・手洗いによる洗濯処理ができます
- ・洗濯の液温は40℃が限度です
- ・中性洗剤を使用してください(蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください)



- ・漂白処理はできません



- ・洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができません



- ・日陰での平干し乾燥がよいです



- ・アイロン仕上げ処理はできません



- ・ドライクリーニング処理はできません



- ・ウェットクリーニング処理はできません

- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)は使わないでください。
- 十分に乾くまで使用しないでください。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

## 長期保管について

- 高温・多湿・低温・乾燥・直射日光のあたる場所・ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- 芯材が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。
- 折りたたんで保管するとシワになるおそれがあります
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

## 仕様

品名		ソフトカバー		
品番		KS-16C	KS-17C	KS-19CA
寸法 長さ×高さ×幅(cm)(取付時)		97.5 × 41.5 × 3.5	97.5 × 47.5 × 3.5	84 × 41 × 3.5
製品質量(g)		500	600	400
材質	生地	表: ポリエステル100%(起毛トリコット) 裏: ナイロンハーフ100%		
	芯材	ウレタンフォーム		
その他		難燃加工		
適合品		KS-16*シリーズ: KS-161G/161Q/166 KS-12*シリーズ: KS-126BG/126CG/ 126MG/126WG/ 126B/126C/126M/126W	KS-17*シリーズ: KS-171G/171Q/176 KS-14*シリーズ: KS-146BG/146CG/ 146MG/146WG/ 146B/146C/146M/146W	KS-19*シリーズ: KS-191H KS-191G KS-191Q
※仕様変更などにより、この取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。適合品に記載のない製品との組合せやご不明な点はお買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。				

### <パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階	☎(022)217-7311(代)
さいたま支店	〒338-0001	さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市中区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)