

NEWS RELEASE

【新製品】

リモートで介護を支援する在宅向けベッドを発売 ～背上げ姿勢を追求した新機構を搭載～

パラマウントベッド株式会社（東京都江東区、代表取締役社長:木村友彦）は、在宅向け介護用ベッドの新製品「楽匠プラスシリーズ」を8月3日に発売します。同製品は、累計26万台の販売実績をもつ介護用ベッドの主力製品「楽匠Zシリーズ」（2014年1月発売）の後継機種となります。

「楽匠プラスシリーズ」は、利用が多い背上げ機能を徹底的に見直し、背だけでなく骨盤も起こす背上げ機構〔特許出願中〕を搭載しました。背上げによる骨盤の後傾を抑え、利用者は安定した背上げ姿勢をとることができ、立ち上がり動作や食事がしやすくなります。また、利用者の臀部と大腿部それぞれに合うように床板の形状や長さを変更したことで、背上げ時の身体のずれ量を軽減します。

利用者向けとレンタル事業者向けにスマートフォン用の専用アプリを用意しました。利用者向けアプリでは、スマートフォンでのベッド操作が可能となり、さらに利用者から家族や介護者への呼び出し通知を確認することができます。オプションのセンサーデバイスと連携することで、遠隔でも利用者の状態やベッドの利用状況を把握できます（センサーデバイスは2020年11月発売予定）。感染防止等への配慮として、離れたところからの操作や確認機能を充実させました。

レンタル事業者向けアプリでは、事業者が利用者宅訪問時にベッドに異常がないか点検する機能などを装備しました。その他、レンタル事業者向けの配慮として、ベッドを構成するフレームの長さ、幅などの共通化を図りました。従来機種に比べ最大約42%少ない在庫量で対応できるようになり、保管スペースの効率化につながります。

価格はオープン。今年度の販売目標台数は26,000台。



楽匠プラスシリーズ

楽匠+
らくしょうプラスシリーズ



スマートフォンでのベッド操作の画面

本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド(株) 広報部
TEL:03-3648-1111
FAX:03-3648-5781

1. 背だけでなく骨盤も起こす背上げ機構

背と腰を支える床板が独立して動いて背を起こす背上げ機構を搭載しました。骨盤が後傾することを抑え利用者は安定した背上げ姿勢をとることができ、立ち上がり動作や食事がしやすくなります。



2. 身長にあわせて寝位置のずれを軽減する膝上げ機能と寝位置表示

膝上げ時の頂点部分がなだらかな曲線形状になる膝床により、低身長から高身長の方の膝の屈曲位置に合わせて膝上げをします。利用者の臀部、大腿部それぞれに合わせて床板の形状や長さを変更したことに加え、利用者が適切な寝る位置を認識できるよう「寝位置表示ラベル」をベッドサイドに備えたことで身体の寝位置がずれることを軽減します。



曲線形状の膝床



大腿部を支える床板

臀部を支える床板にある寝位置表示ラベル




3. スマートフォンでのベッド操作が可能(利用者向けアプリ)

付属の手元スイッチでの操作に加え、楽匠プラスシリーズと連携したスマートフォンでベッドの操作ができます。スマートフォンでは、好みの背上げ角度やベッドの高さを記憶させることや、操作しやすいよう使用する操作ボタンを大きく表示させることができます。



通常の操作画面

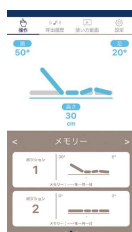

好み位置に操作する画面



大きい操作ボタンの画面



付属の手元スイッチ

4. センサーデバイスと連携して遠隔からの見守りを実現

オプションのセンサーデバイス(2020年11月発売予定)と楽匠プラスシリーズを連携させることで、離れた場所から利用者の状態やベッドの利用状況などを確認することができます。(介護保険対象外)

見守りのイメージ図



5. ベッドの動作自動点検機能(事業者向けアプリ)

背上げ、膝上げ、高さ調節など電動機能について、事業者向けアプリを通してスマートフォンと連携させることで異常がないか短時間で自動点検する機能を搭載しています。

6. ベッドの使いかた説明動画サービス(事業者向け・利用者向けアプリ)

利用者や家族がベッドの使用方法を理解しやすいよう、取扱説明書に加え動画でわかりやすく説明するサービスを事業者向けと利用者向けの両方のアプリで提供します。



動画再生画面

7. レンタル事業者の保管スペースの効率化

ベッドを構成するフレームにおいて、長さ、幅などを共通化することで、従来の機種に比べ最大約42%少ない在庫量で対応できるようになり、保管スペースの効率化が図れます。

8. 身近な自然をモチーフにしたデザイン「バイオフィリックデザイン」を採用

「バイオフィリックデザイン」は、人間が本能的に自然とつながりを求めるという考え方に基づいたデザインコンセプト。ストレス軽減や活動意義の向上などの心理的効果が期待され、自然界や植物を感じさせるアースカラー機種「モスグリーン」をラインアップしました。



楽匠プラスシリーズ「モスグリーン」タイプ

9. 504 種類の豊富なラインアップ

背上げなどの動作モーションの種類(7タイプ)、幅(2タイプ)、長さ(2タイプ)、ボードデザイン(5タイプ)、フレームデザイン(4タイプ)などの組み合わせによる504種類の中から選ぶことができます。

以上