

NEWS RELEASE

電動介護リフト 3 機種を発売

～ラインアップを拡充し、看護・介護従事者の腰痛予防に貢献～

パラマウントベッド株式会社(東京都江東区、代表取締役社長:木村恭介)は 2015 年 4 月 1 日、医療や介護の現場で移乗等をサポートするリフト 3 機種、床走行式電動介護リフト(脚部電動開閉式)、起立・立位補助リフト、歩行用リフトをそれぞれ発売します。ベッド周りでの移乗だけでなく排泄介助やリハビリなど、使用目的に応じより多くの場面でリフトを活用することが可能となります。幅広いラインアップにより、看護・介護従事者の腰痛予防と安全・安心な介護環境づくりを目指します。

電動介護リフトは、ベッドから車椅子・トイレなどへの移乗や歩行練習の際に、吊り具で本人を抱え上げることなどにより、本人の安全を図り介助者の負担を軽減する福祉用具です。

脚部電動開閉式の「床走行式電動介護リフト」は、吊り上げることでベッドから車椅子等への移乗を行うリフトです。手元スイッチ操作により脚部の開閉を電動で行うことが可能です。

起立・立位補助リフト「ミニリフト 125」は、立ち上がりと立位の保持を補助するリフトです。吊り具が本人の臀部を覆うことなく立位を保つことができるため、衣服の着脱や排泄処理などを行いやすく、排泄介助に適しています。狭いスペースでも取り回しがしやすいコンパクト設計です。

歩行用リフト「エヴァ 450」は、機能訓練室などで行われる歩行練習に適したリフトです。前輪が大きく走行性に優れ、転倒を予防しながらより安全に歩行練習を行うことができます。

また、新しくオプションを追加。本人の体格に合わせて選べるサイズ違いのハンガー(2種類)のほか、拘縮等で座位が取れない方を仰向けのまま吊り上げることのできるハンガー、吊ることで体重測定が行える専用スケール等をラインアップしました。

【背景】抱きかかえるなど人の力に頼った移乗介助は、介助者の身体に大きな負担となり腰痛の原因にもなります。また、力任せの介助は、介助される本人にも不安や苦痛を与えるとともに、転倒事故につながる可能性もあります。介助者・本人双方にとって安心して安全に移乗を行うには、リフト等の移乗用具の活用が有効です。当社は、北欧の福祉先進国スウェーデンのハンディケア社と提携し、移乗用具を取り扱ってきました。今回、取り扱い機種を拡充することで、看護・介護従事者の労働環境を改善し腰痛予防に資するとともに、本人の自立に向けた、より安全・安心な介護環境づくりに貢献します。

主な特長や仕様、価格は別紙のとおりです。



「床走行式電動介護リフト」
(脚部電動開閉式)



使用例



「ミニリフト 125」



使用例



「エヴァ 450」
※手すりはオプション



使用例

本件に関するお問い合わせ先
パラマウントベッド(株)
広報部 高橋、熊谷
TEL: 03-3648-1111
FAX: 03-3648-5781

〔主な特長・仕様・価格〕

■「床走行式電動介護リフト」（脚部電動開閉式）

吊り具で吊り上げベッドから車椅子等への移乗を行うリフトです。アームの上げ下げと脚部の開閉を電動で行えます。



手元スイッチ

脚部の開閉を手元スイッチの操作により電動で行うことが可能です。

〔仕様〕

材質：支柱・ブーム／アルミ製
ベースフレーム／スチール製
安全使用荷重：205kg
質量：38kg
寸法：全長／130cm、全幅／65～102cm

〔製品コード〕 KQ-787

〔価格〕 460,000 円（非課税）

■立位・起立補助リフト「ミニリフト 125」

座位からの立ち上がりや立位をサポートする小型リフトです。本人が立ったまま方向転換でき、吊り具が臀部を覆わないので排泄介助に適しています。



リフトアーム



①吊り具で背面を支え



②リフトアームが電動で身体を引き上げます。

〔仕様〕

材質：スチール製
安全使用荷重：125kg
質量：43kg
寸法：全長／95cm、全幅／51.5～83.5cm

〔製品コード〕 KZ-A69710

〔価格〕 500,000 円（非課税）

■歩行用リフト「エヴァ 450」

前輪が大きく走行性に優れ、歩行練習に適したリフトです。

手すり
※別売

前輪



吊り具で身体を支え、歩行をサポートします。
オプションの手すりを取り付けることで、より安定した歩行が行えます。

〔仕様〕

材質：アルミ製
安全使用荷重：205kg
質量：34g
寸法：全長／130cm、全幅／65～102cm

〔製品コード〕 KZ-A78700

〔価格〕 460,000 円（非課税）

※手すりは別売。

●オプション

リフトへの取り付けや付け替えにより、使い方の幅を広げることが可能です。

※ミニリフト 125 には適合しません。

■スリングバー(S サイズ)



標準装備のハンガー(スリングバー・M サイズ)と比べてフックの間隔が 10cm 狭いタイプ。子供ややせた方により使いやすいサイズです。

〔製品コード〕 KZ-A79366
〔価格〕 31,500 円(税抜)


■スリングバー(L サイズ)



標準装備のハンガー(スリングバー・M サイズ)と比べてフックの間隔が 15cm 広いタイプ。大柄の方により使いやすいサイズです。

〔製品コード〕 KZ-A79368
〔価格〕 35,000 円(税抜)

■スリングバースプレッダーM

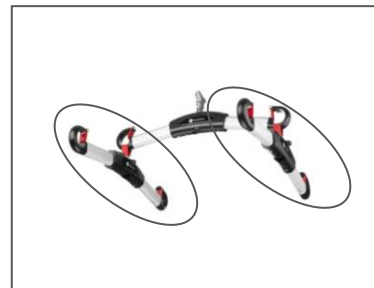

ハンガーに掛けて 4 点吊りに使用します。よりリクライニングした吊り上げ姿勢になります。

※2 本組

〔製品コード〕 KZ-A79002
〔価格〕 47,000 円(税抜)

■ストレッチャーバー



仰臥位姿勢のまま吊り上げるためのハンガーです。

〔製品コード〕 KZ-A79000
〔価格〕 260,000 円(税抜)

■ストレッチャースリング R



仰臥位姿勢のまま吊り上げるためのスリングシートです。(ストレッチャーバー専用)
※写真は使用例(リフト本体・ストレッチャーバーは含みません)

〔製品コード〕 KZ-A73909
〔価格〕 51,000 円(税抜)

■スケール 660



リフトに取り付けられる体重計です。
※測定した計量値を取引や証明行為に使用することはできません。

〔製品コード〕 KZ-A79040
〔価格〕 270,000 円(税抜)

■アンビュレーションアーム



リフトに取り付けられる手すりです。歩行練習に適しています。使用しない時は回転させて下げておくことができます。

〔製品コード〕 KZ-A78701
〔価格〕 150,000 円(税抜)

以上